
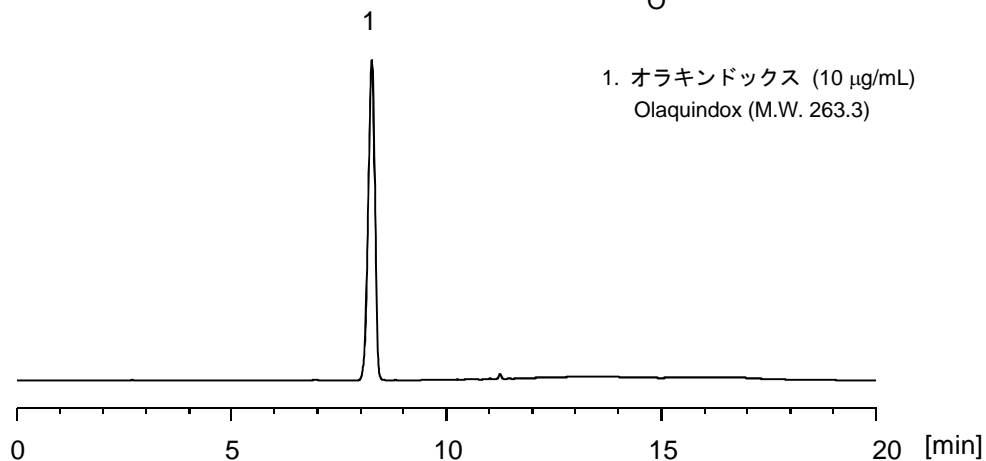


## オラキンドックス

## Olaquinox

オラキンドックスは、キノロン系の合成抗菌剤で動物用医薬品です。ここでは、CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGII S5 (4.6 mm i.d. x 250 mm) を用いた分析例を示します。

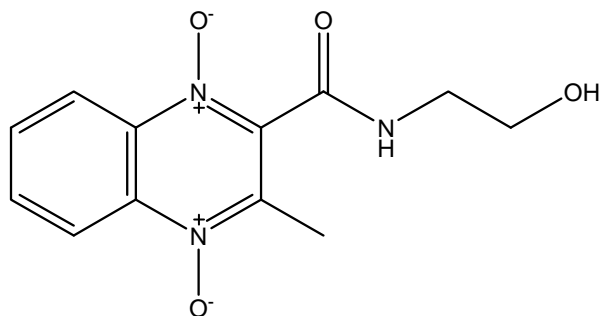

### 【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGII S5 ; 4.6 mm i.d. x 250 mm  
Mobile phase : A) H<sub>2</sub>O  
B) CH<sub>3</sub>OH  
B 15 % (0 min) -> 15 % (5 min) -> 70 % (10 min)  
-> 70 % (14 min) -15 % (18 min) -> 15 % (25 min) Gradient  
Flow rate : 1 mL/min  
Temperature : 35 °C  
Detection : UV 260 nm  
Inj. vol. : 20 µL  
Sample dissolved in : 40 vol% CH<sub>3</sub>OH