
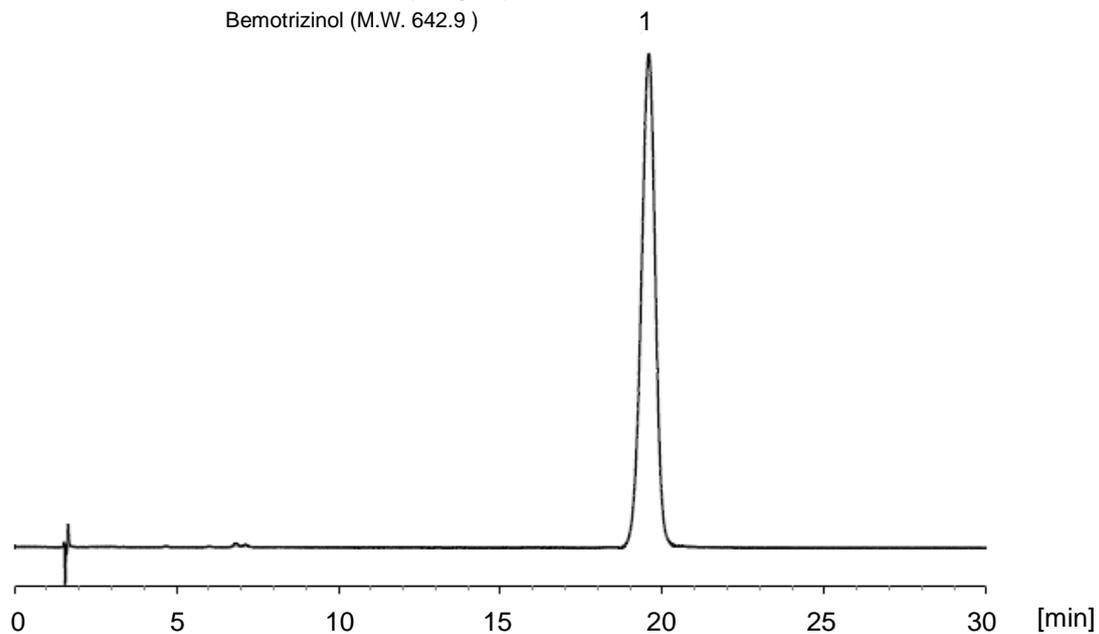


## ベモトリジノール

## Bemotrizinol

ベモトリジノールは紫外線吸収剤として化粧品などに配合されています。ここでは、CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGII S5 (4.6 mm i.d. x 150 mm) を用いた分析例を示します。

PEAKMAN SP さまよりご提供データ

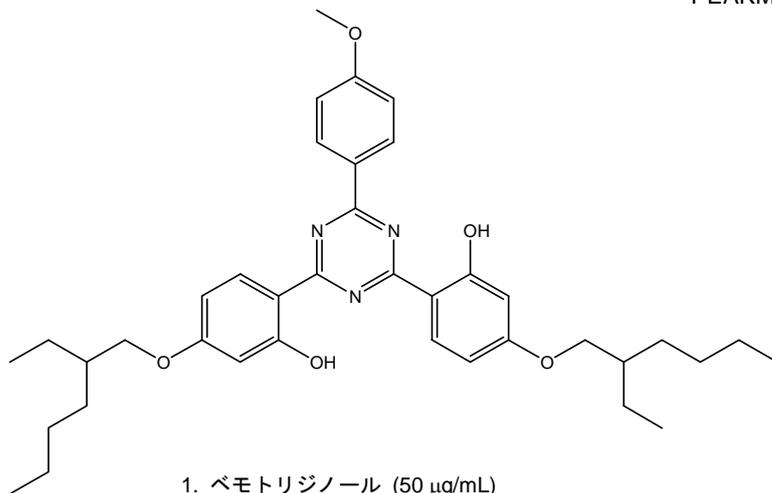

### 【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGII S5 ; 4.6 mm i.d. x 150 mm  
Mobile phase : CH<sub>3</sub>OH / CH<sub>3</sub>CN = 45 / 55  
Flow rate : 1 mL/min  
Temperature : 35 °C  
Detection : PDA 340 nm  
Inj. vol. : 3 μL