


## フェンピロキシメート

## Fenpyroximate

フェンピロキシメートは、殺虫剤として果樹や茶のハダニ類に対し使用されています。一日許容摂取量 (ADI) は 0.0097 mg/kg/day です。

Fenpyroximate, a pesticide, is used for the extermination of spider mites on fruit trees and tea. Its acceptable daily intake (ADI) is 0.0097 mg/kg/day.

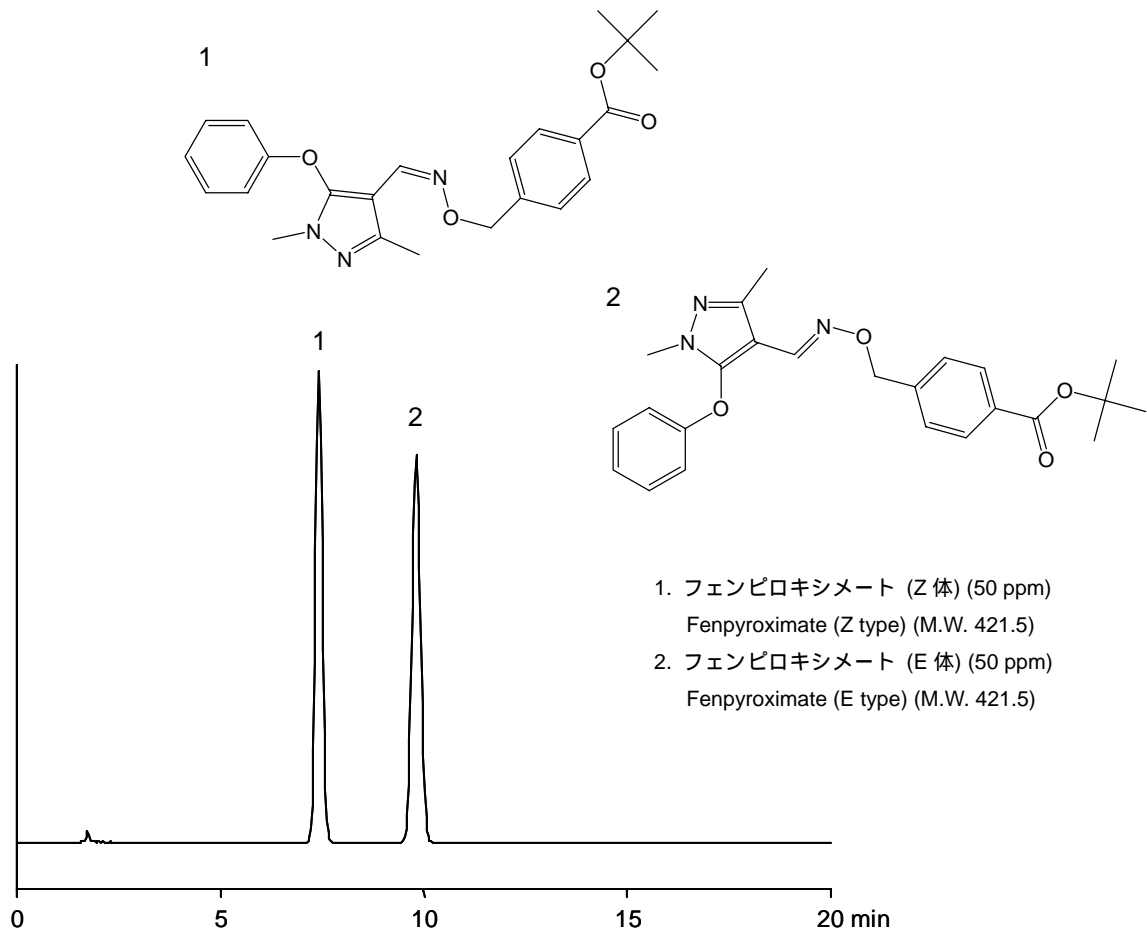

### 【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGII S5 ; 2.0 mm i.d. x 150 mm  
Mobile phase : H<sub>2</sub>O / CH<sub>3</sub>CN = 30 / 70  
Flow rate : 200 μL/min  
Temperature : 40 °C  
Detection : PDA 254 nm  
Inj. vol. : 2 μL  
Sample dissolved in : CH<sub>3</sub>CN  
※ 1 μg/mL = 1 ppm