


ダイムロン

Dymuron

ダイムロンは、尿素系の除草剤です。一日許容摂取量 (ADI) は 0.3 mg/kg/day です。

Dymuron is a urea herbicide. Its acceptable daily intake (ADI) is 0.3 mg/kg/day.

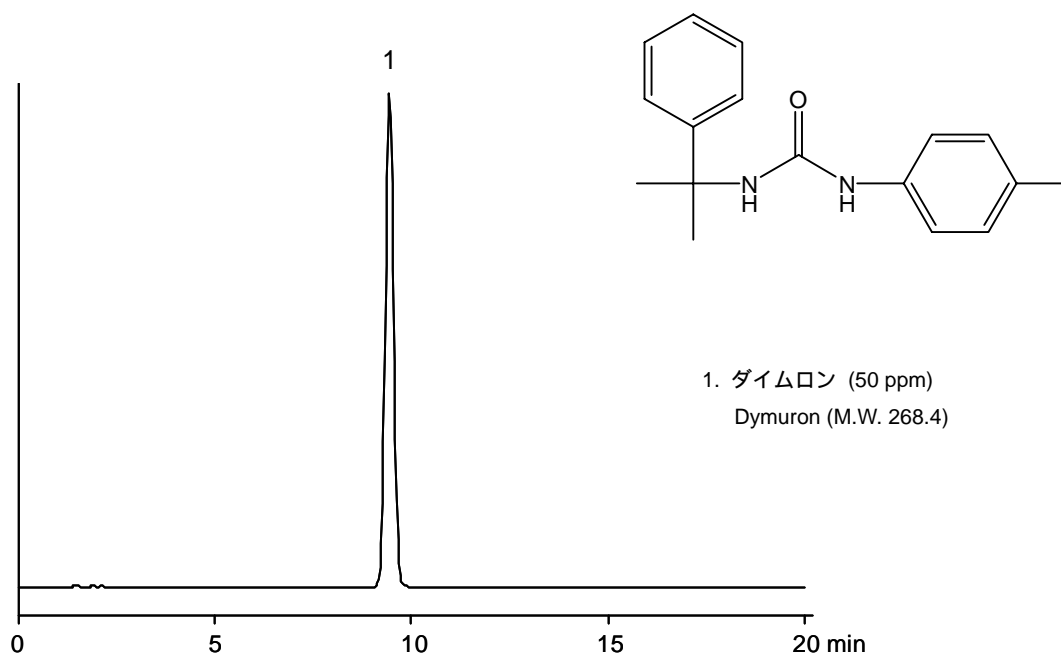

【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C₁₈ MGII S5 ; 2.0 mm i.d. x 150 mm
Mobile phase : H₂O / CH₃CN = 50 / 50
Flow rate : 200 μL/min
Temperature : 40 °C
Detection : PDA 243 nm
Inj. vol. : 2 μL
Sample dissolved in : CH₃CN
※ 1 μg/mL = 1 ppm