
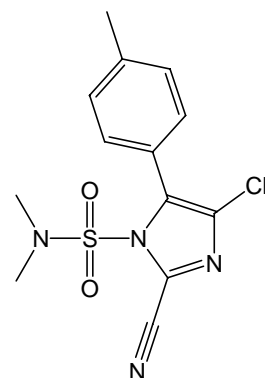


シアゾファミド

Cyazofamid

シアゾファミドは、シアノイミダゾール系の殺菌剤です。一日許容摂取量 (ADI) は 0.17 mg/kg/day です。

Cyazofamid is one of the cyanoimidazole disinfectants. Its acceptable daily intake (ADI) is 0.17 mg/kg/day.

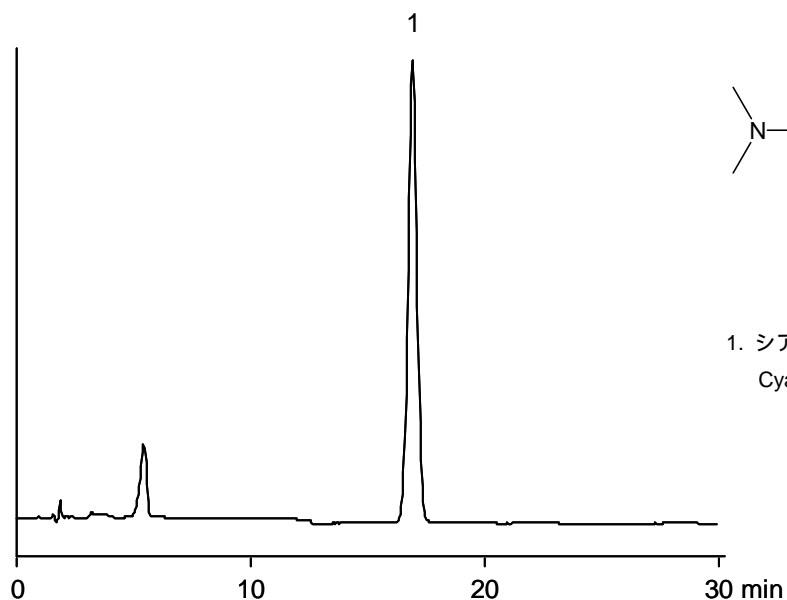

1. シアゾファミド (50 ppm)
Cyazofamid (M.W. 324.8)

【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C₁₈ MGII S5 ; 2.0 mm i.d. x 150 mm
Mobile phase : 2 mmol/L CH₃COONH₄ / CH₃OH = 60 / 40
Flow rate : 200 μL/min
Temperature : 40 °C
Detection : PDA 280 nm
Inj. vol. : 2 μL
Sample dissolved in : CH₃CN
※ 1 μg/mL = 1 ppm