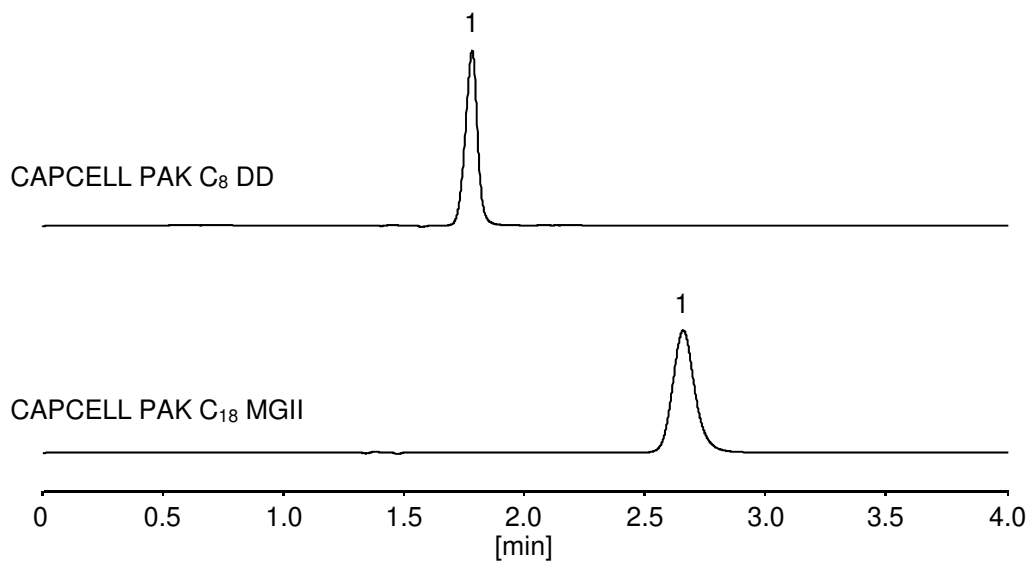
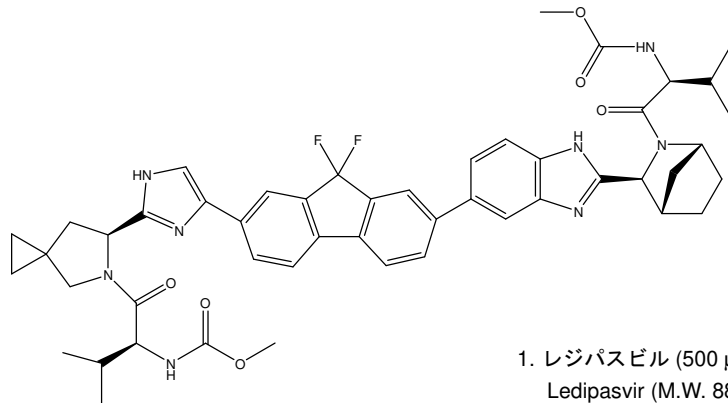


レジパスビルは非常に有効性の高い C 型肝炎治療薬「ハーボニー」の主要成分の一つです。ここでは CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGII S5 及び CAPCELL PAK C<sub>8</sub> DD S5 (4.6 mm i.d. x 150 mm) を用いた分析例を示します。

**【HPLC Conditions】**

Column size	: S5 ; 4.6 mm i.d. x 150 mm
Mobile phase	: 0.1 vol% HCOOH / CH <sub>3</sub> CN = 55 / 45
Flow rate	: 1 mL/min
Temperature	: 40 °C
Detection	: UV 254 nm
Inj. vol.	: 10 µL
Sample dissolved in	: 50 vol% CH <sub>3</sub> CN
	※ 1 µg/mL = 1 ppm