
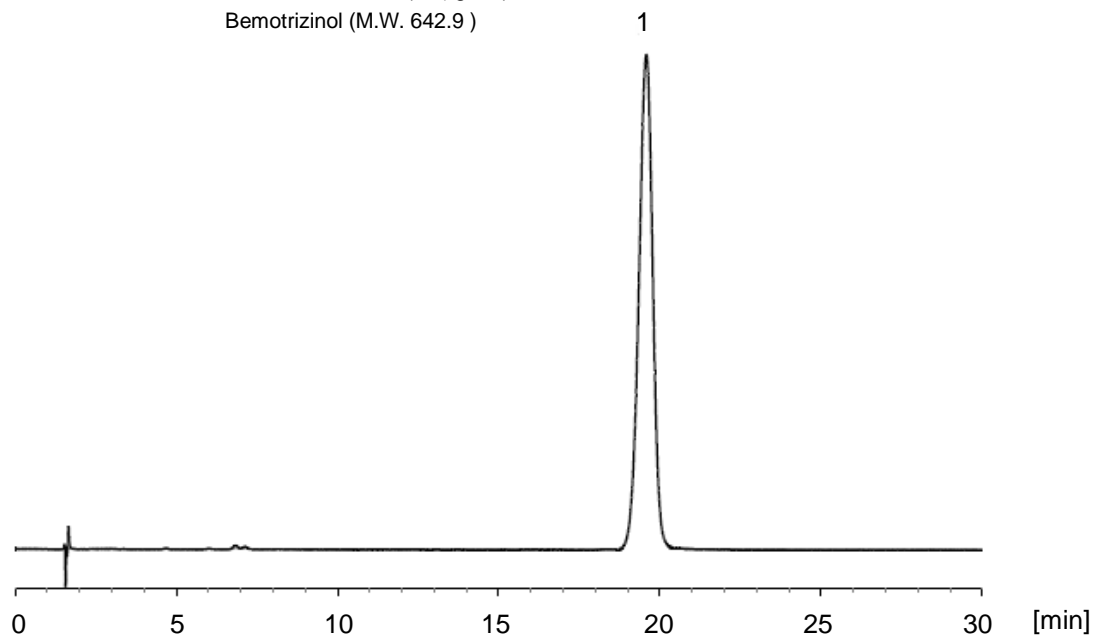


ベモトリジノール

Bemotrizinol

ベモトリジノールは紫外線吸収剤として化粧品などに配合されています。ここでは、CAPCELL PAK C₁₈ MGII S5 (4.6 mm i.d. x 150 mm) を用いた分析例を示します。

PEAKMAN SP さまよりご提供データ

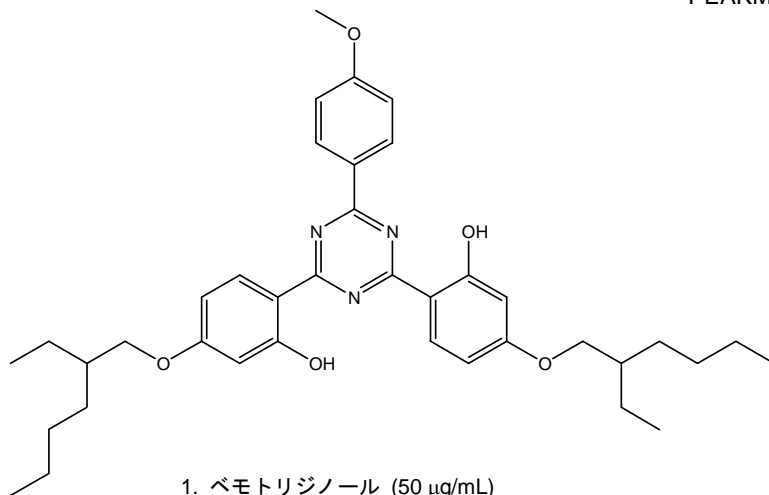

【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C₁₈ MGII S5 ; 4.6 mm i.d. x 150 mm
Mobile phase : CH₃OH / CH₃CN = 45 / 55
Flow rate : 1 mL/min
Temperature : 35 °C
Detection : PDA 340 nm
Inj. vol. : 3 μL