


コーラ・ダイエットコーラ中の糖類の比較を行いました。糖成分の違いをみることができます。

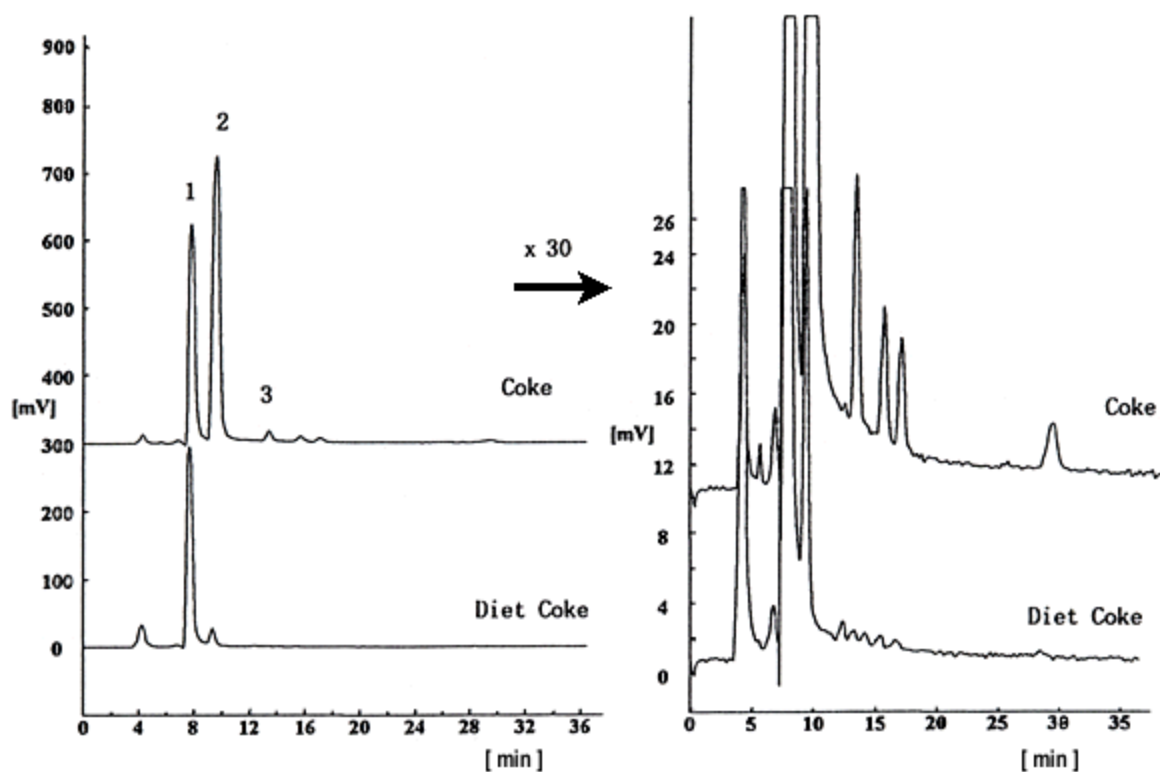

1	フルクトース	2	グルコース	3	スクロース
	Fructose		Glucose		Sucrose

HPLC Conditions	
Column	CAPCELL PAK NH ₂ UG80 S5 : 1.5 mm i.d. x 250 mm
Mobile phase	CH ₃ CN / H ₂ O = 80 / 20
Flow rate	100 μL/min
Reagent	1.0 mol/L LiOH
Flow rate of reagent	200 μL/min
Temperature	40
Detect	PAD
Inj. vol.	1 μL