


ケイヒ（桂皮）は日本薬局方収載の生薬で、健胃薬として用いられています。今回の分析は、大阪府立公衆衛生研究所の条件に従い行いました。

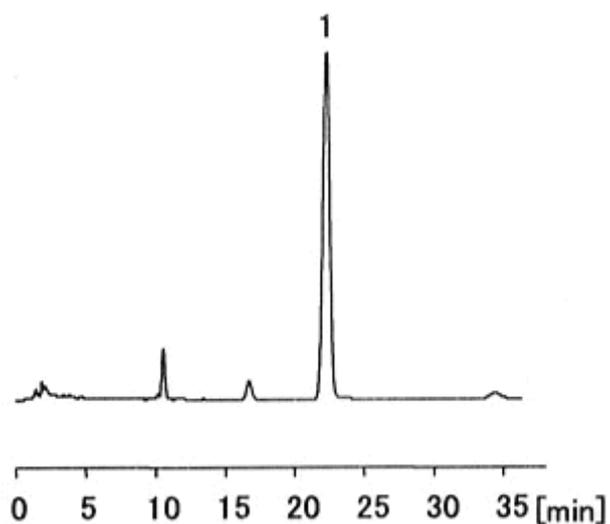

1	ケイヒ酸
	Cinnamic acid

HPLC Conditions

Column	CAPCELL PAK C18 MGII S5 : 4.6 mm i.d. × 150 mm
Mobile phase	CH ₃ CN / H ₂ O / CH ₃ COOH = 75 / 24 / 1
Flow rate	1.0 mL/min
Temperature	R.T.
Detect	UV 275 nm
Inj. vol.	2 μL
Sample	50vol%CH ₃ OHで抽出した。