


## アストラガロシド

## Astragaloside

アストラガロシドは、れんげ草 (astragalus) から発見されたサポニン化合物です。CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGIII S5 (2.0 mm i.d. x 150 mm) を用いた例を示します。良好なピーク形状で保持されました。

Astragaloside, one of the saponins found in astragalus, could be adequately retained with a good peak shape, with CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGIII S5 (2.0 mm i.d. x 150 mm).

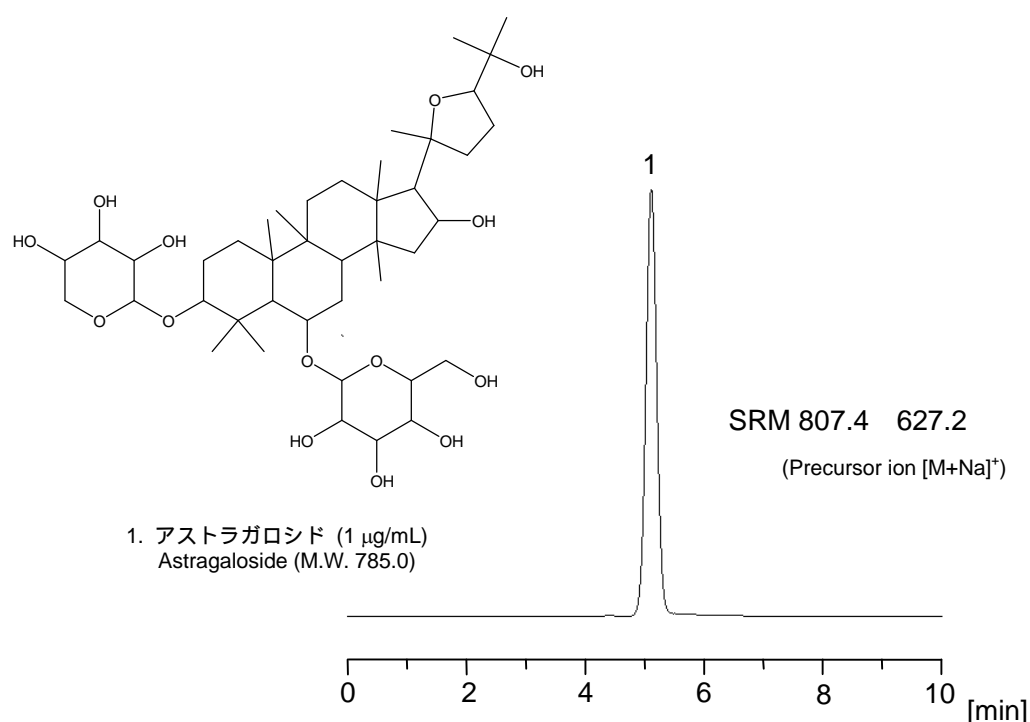

### 【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGIII S5 ; 2.0 mm i.d. x 150 mm  
Mobile phase : 0.1 vol% HCOOH / CH<sub>3</sub>OH = 20 / 80  
Flow rate : 200 µL/min  
Temperature : 30 °C  
Detection : MS/MS  
Ionization : ESI Positive  
Inj. vol. : 1 µL  
Sample dissolved in : Mobile phase  
1 µg/mL = 1 ppm