


フェンピロキシメート

Fenpyroximate

フェンピロキシメートは、殺虫剤として果樹や茶のハダニ類に対し使用されています。一日許容摂取量 (ADI) は 0.0097 mg/kg/day です。

Fenpyroximate, a pesticide, is used for the extermination of spider mites on fruit trees and tea. Its acceptable daily intake (ADI) is 0.0097 mg/kg/day.

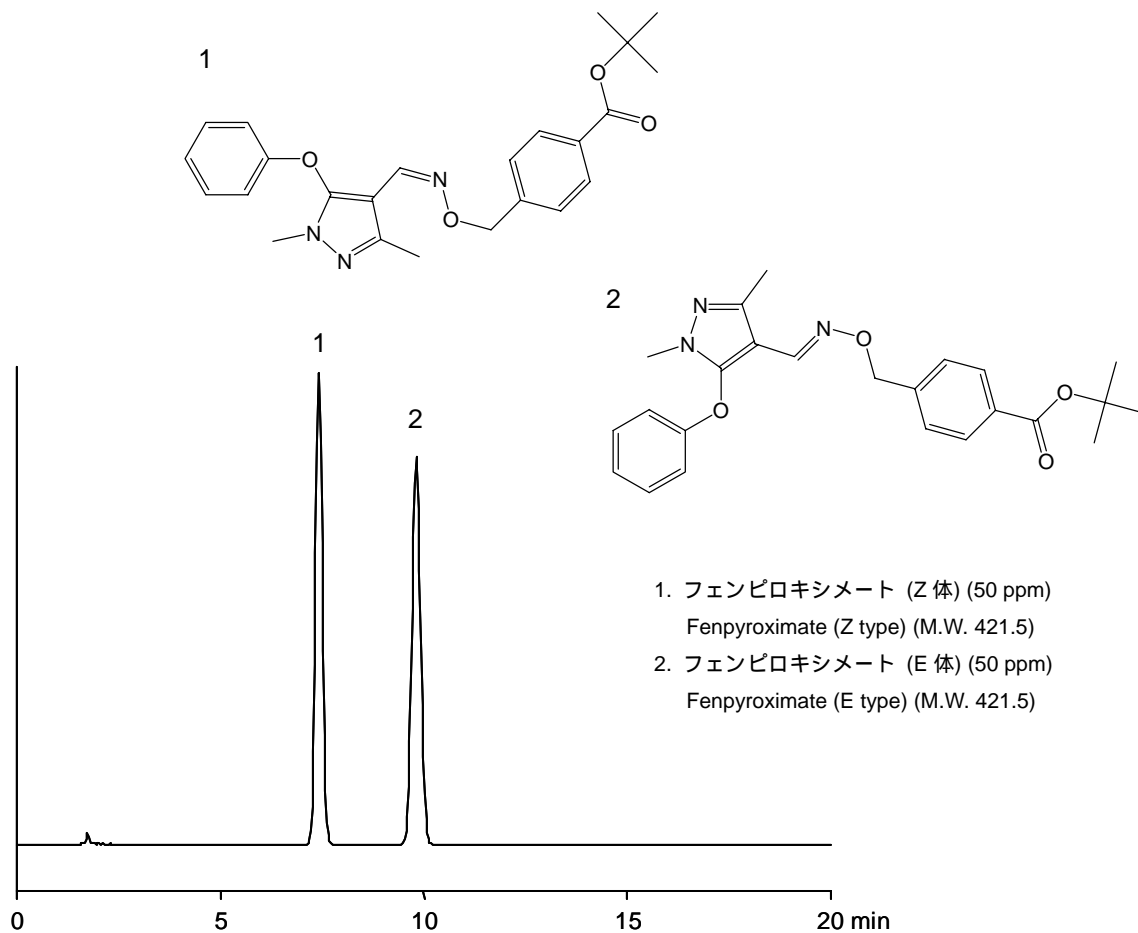

【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C₁₈ MGII S5 ; 2.0 mm i.d. x 150 mm
Mobile phase : H₂O / CH₃CN = 30 / 70
Flow rate : 200 μL/min
Temperature : 40 °C
Detection : PDA 254 nm
Inj. vol. : 2 μL
Sample dissolved in : CH₃CN
※ 1 μg/mL = 1 ppm