


## シアゾファミド

## Cyazofamid

シアゾファミドは、シアノイミダゾール系の殺菌剤です。一日許容摂取量 (ADI) は 0.17 mg/kg/day です。

Cyazofamid is one of the cyanoimidazole disinfectants. Its acceptable daily intake (ADI) is 0.17 mg/kg/day.

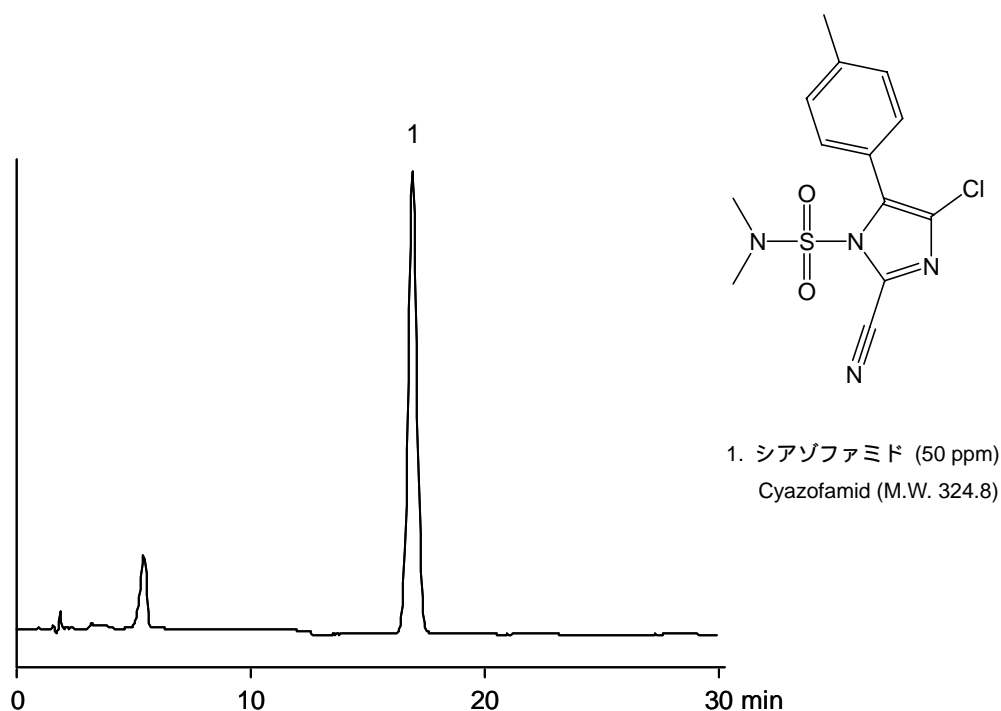

### 【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C<sub>18</sub> MGII S5 ; 2.0 mm i.d. x 150 mm  
Mobile phase : 2 mmol/L CH<sub>3</sub>COONH<sub>4</sub> / CH<sub>3</sub>OH = 60 / 40  
Flow rate : 200 μL/min  
Temperature : 40 °C  
Detection : PDA 280 nm  
Inj. vol. : 2 μL  
Sample dissolved in : CH<sub>3</sub>CN  
※ 1 μg/mL = 1 ppm